

INSTRUCIUNI DE FOLOSIRE

PENTRU RESPIRATORI CLASA FFP2, N95, KN95, FFP3

Tabel simplificat cu clasele de protecție respiratorie

(zdroj: MZČR dle ECDC. Prevenirea și controlul infecțiilor pentru COVID-19 în instituțiile de asistență medicală – prima actualizare)

Clasa de protecție STANDARD	FFP2	N95	KN95	FFP3
Eficiența de filtrare	94 %	95 %	95 %	99 %

Respiratoarele din toate clasele de mai sus filtrează bacterii, viruși, praf, aerosoli, smog, fum, cu eficiența minimă enumerată în tabel. Nu oferă protecție împotriva gazelor. Pentru funcționarea corectă a unui aparat respirator din oricare dintre clasele de mai sus, este esențial să urmați aceste instrucțiuni de utilizare și să verificați în mod regulat dacă există scurgeri. Folosiți aparatul respirator numai pentru perioada specificată de producător. Timpul obișnuit de utilizare a unui respirator de unică folosință este o tură, adică 8 ore într-un mediu standard, pentru aparatele respiratorii reutilizabile urmează recomandările producătorului. Într-un mediu contaminat microbiologic și după expirarea utilizării, eficacitatea mașinii respiratorii scade semnificativ și respirația încetează să mai fie eficientă. Producătorul nu garantează eficiența de filtrare a aparatului respirator dacă acesta este deteriorat mecanic. Nu utilizați aparatul respirator în flăcără deschisă sau într-un mediu în care concentrația de oxigen este mai mică de 17%.

Majoritatea aparatelor respiratorii au dimensiuni universale. Aplicarea corectă a aparatului respirator pe față este esențială pentru o respirație adecvată. Dacă respiratorul nu este suficient de strâns, substanțele nedorite pot pătrunde în golurile din stânga. Dacă nu puteți atășa corect respiratorul, ar trebui să încercați un alt model. Respiratorul nu trebuie să fie prea mare pentru a nu vă obstrucționa ochii sau vederea. În același timp, ar trebui să se potrivească perfect pe toată marginea feței. Zona din jurul nasului și bărbiei merită o atenție deosebită. Fața ta trebuie să fie rasă curată în zona în care aparatul respirator este aproape de piele. Barba și miriștea pot cauza scurgerile respiratorii.

Depozitare înainte de utilizare:


- într-o pungă sigilată, de exemplu în ambalajul original într-un mediu sigur (aer curat)
- ferit de lumina directă a soarelui
- într-o încăpere cu umiditate și temperatură în intervalul indicat pe ambalaj.

Depozitare după utilizare:

- Așezați respiratorul într-un recipient impermeabil și aruncați-l în deșeurile amestecate.
- După îndepărtarea mașinii de respirație reutilizabile de pe față, lăsați să aerisească într-un loc sigur cu aer proaspăt și numai după ce este complet uscat, puneți-l înapoi într-un ambalaj de protecție, unde poate rămâne până la o utilizare ulterioară. Pentru a elimina posibila contaminare cu microorganisme periculoase, puteți pulveriza respiratorul în interior și în exterior cu dezinfectanți proiectați pentru tipul de respirator. La sfârșitul duratei sale de viață, puneți respiratorul într-un recipient impermeabil și aruncați-l în deșeurile amestecate.

Implementare:

- 1 Spălați sau dezinfectați bine mâinile
- 2 Deschideți cu atenție pungă în care este/sunt ambalat(e) respirator(ele) și scoateți 1 bucată.
- 3 Pune-l pe față astfel încât să-ți acopere gura și nasul. Prinde benzile sau benzile de cauciuc în spatele urechilor, astfel încât aparatul respirator să țină bine fața. În cazul benzilor de cauciuc concepute pentru a fi atașate la spate, trageți-le peste cap și reglați-le astfel încât respiratorul să vă țină confortabil.
- 4 Apăsăți respiratorul pe față și reglați-l cu cealaltă mână, astfel încât să se potrivească perfect. Acordați o atenție deosebită modelării clemei în zona nasului
- 5 Respiratorul are dimensiunea potrivită și este bine atașat dacă simțiți rezistență la inspirație și expirație, iar pereții aparatului respirator alternează între apăsare și desprindere de pe față.
- 6 Spălați-vă sau dezinfectați bine mâinile după îndepărtarea mașinii respiratorii.

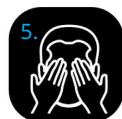

citii instrucțiunile
de utilizare



informații
importante din
instrucțiunile de utilizare



CE/PAPA/PE



produs nesteril



destinate de
unică folosință



depozitați într-
un loc uscat



limită de
temperatură



Limita superioară
temperatură



limită inferioară
de temperatură



data expirării



protejați de lumina
soarelui

REF

număr de catalog

LOT

numărul lotului



data fabricației



producător